


ご使用前にこの取扱説明書を
よくお読みになり、保管してください。

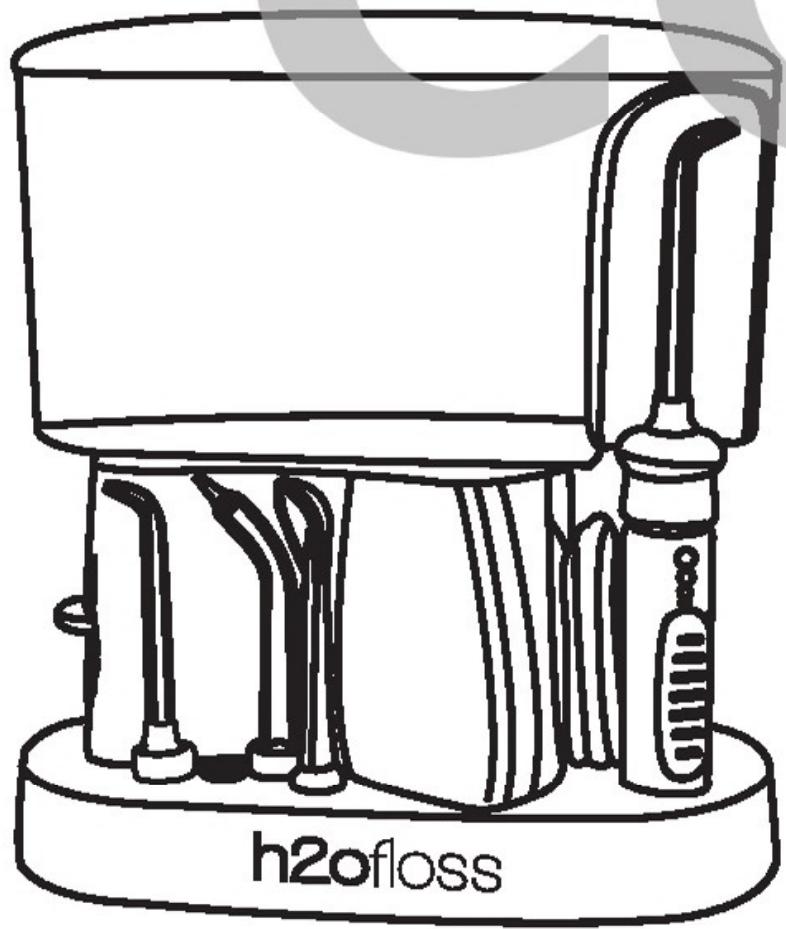

COPY


h2ofloss®

H₂Oフロス・口腔洗浄器
(エイ ツーオー フロス)

モデル: hf-7J(50Hz/60Hz)

H₂Oフロスは、パルス水流とブラシによる洗浄効果により、食べ物のカスやブラークを除去し、歯と歯茎の健康を保つための補助器具として効果的です。いつまでも自分の歯で噛むために、そして輝く笑顔のために、本製品をお役立て下さい。

本製品を安全に、そして最大限に活用するために、本説明書をよくお読みになってください。

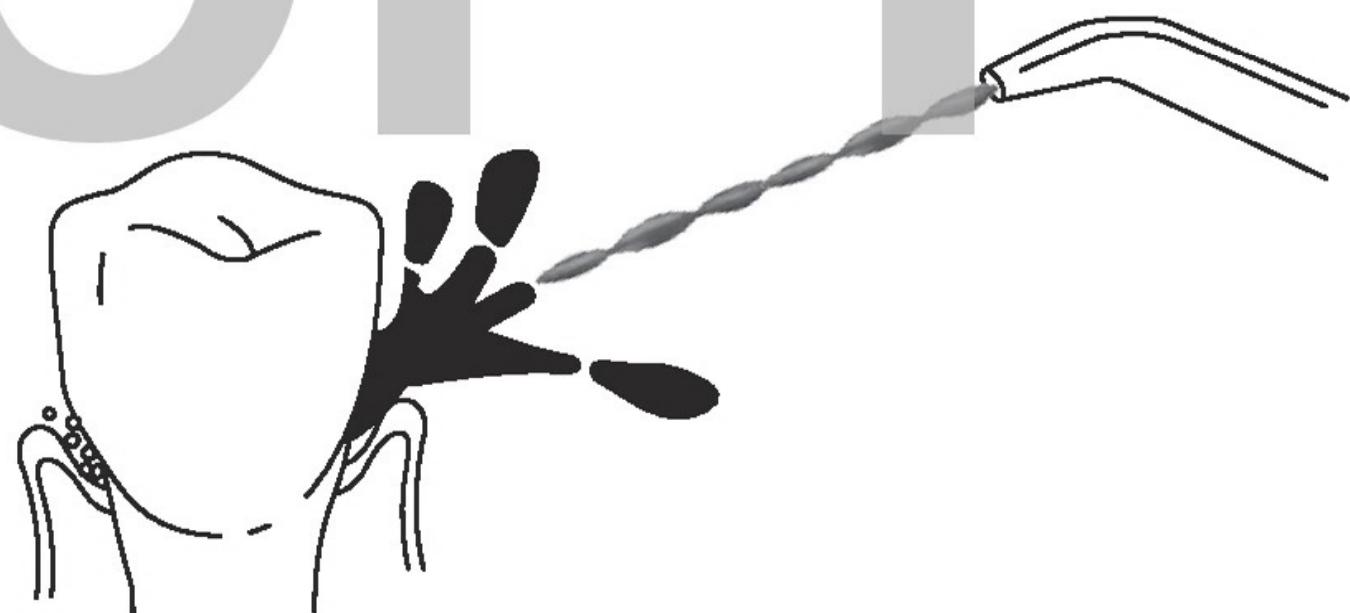

各部名称



6

使用方法

7-12

お手入れ方法

13

トラブルシューティング

14

製品保証

15

他の電気製品同様、ご使用の際には、次のことにご注意下さい。特にお子様のいるご家庭では十分にお気を付け下さい。

ご使用の前にこの取扱説明書の内容を必ず全てお読み下さい。

危険：

感電を避けるために

- ・屋外では使用しないでください。
- ・使用後、必ずコンセントを抜いてください。
- ・濡れた手で電源プラグに触らないで下さい。
- ・水やその他の液体の中に浸けないで下さい。
- ・電源コードに損傷がないことをときどき確認してください。
- ・入浴中は使用しないで下さい。
- ・製品が浴槽、シャワー、シンク、トイレ等に落ちるような場所に置かないで下さい。
- ・水中に落ちた場合、製品をすぐに拾わず、速やかに電源コンセントを抜いて下さい。

やけど、感電、発火、重大な怪我や損傷を避けるために



- ・製品仕様で決められた電圧以外のコンセントに挿すことはしないでください。
- ・電源コードやコンセントが損傷している、正しく動作しない、落としたり強い衝撃を与えた、水(その他の液体)に浸けてしまったなどの場合は、製品の使用を中止してください。
- ・お子様や特に必要がある方については、本製品を正しくお使いになるための適切な指導、監督が必要です。
- ・舌の裏側、耳、鼻、その他のデリケートな場所に水を直接噴射しないでください。この製品は、強い水圧で水を噴射するため、これら敏感な部分に当てるとき重大な怪我をする可能性があります。正しいご使用方法については、「使用方法」を参照して下さい。
- ・本製品のご使用については、本取扱説明書に記載された方法に従うか、歯科医の指導に従って下さい。
- ・口腔内にアクセサリーを着けているときは使用しないで下さい。使用前には必ず外して下さい。
- ・チップやブラシ類は、h2ofloss が推奨する専用品をお使い下さい。
- ・水槽には、ぬるま湯(冬期)や歯科医が推奨するマウスウォッシュなどを入れて下さい。

※ヨードを含む液を使用すると、モーターやホース内で水が詰まり故障を引き起こします。

※また、ソーダ水、塩、その他研磨性のある液体などは機械を損傷させますので使用しないで下さい。

- ・マウスウォッシュなどをお使いの後は、詰まりを防ぐため、ご使用後には水道のお水を通して機械内部を洗浄してください。
- ・本製品の開口部やホースには、異物を入れないで下さい。
- ・酸素またはスプレー缶を使用している場所では使用しないで下さい。引火や爆発の恐れがあります。
- ・1年以内に、口腔内の外科処置を受けた場合、調子が悪い、または歯周病が進んでいる場合などの場合には、ご使用前に歯科医に相談してください。
- ・当製品の連続使用時間は8分です。8分ご使用のあとは2時間ほど時間を置いてからご使用ください。


本取扱説明書は必ず保管してください。

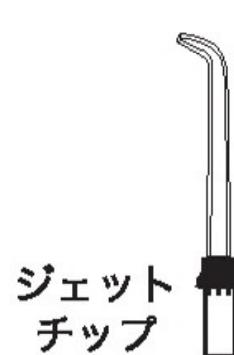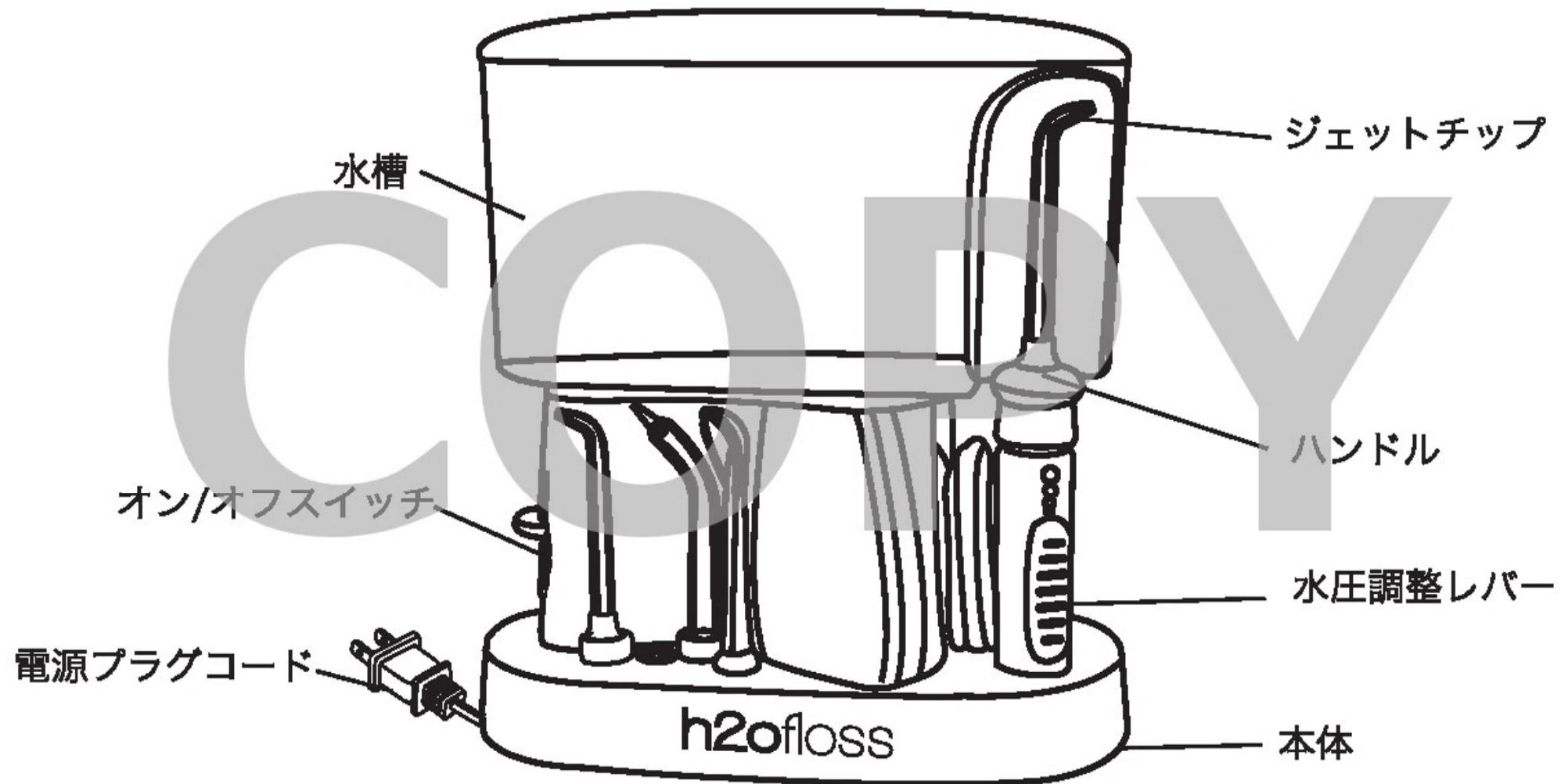

電源プラグを当製品の規格 100V50Hz/60Hz に適合した電源コンセントに差し込みます。当製品は、パルス水流速度を一定に保つため、東日本仕様(50Hz)と西日本仕様(60Hz)に分かれていますので、ご使用になる地域の Hz をご確認の上、適合した Hz にてご利用ください。
＜注意＞異なる Hz でのご使用は故障の原因になる可能性がありますのでおやめください。コンセントに元電源スイッチがある場合、オンになっていることを確認してください。


水槽の準備

本体から水槽を取り外します。水槽に常温の水、またはぬるま湯を入れます。本体に水槽を乗せ、しっかりとセットします。ジョイント部のセットがあまいと、水が出ない、または十分に水圧が出ない原因となります。

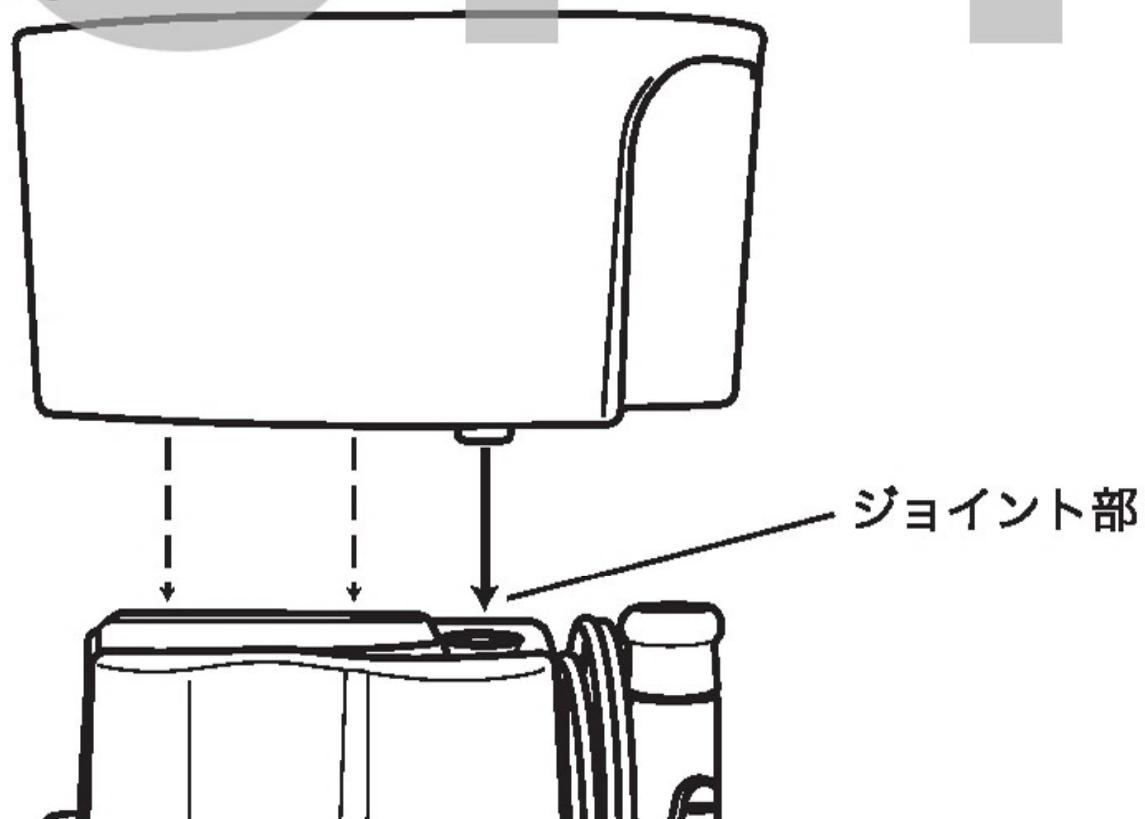

ハンドル上部のノブを下に押し下げながらチップを挿入し、しっかりと差込んでからノブを戻してチップをロックします。

チップを外す時には、ハンドル上部のノブを下に押し下げながら引き抜いてください。

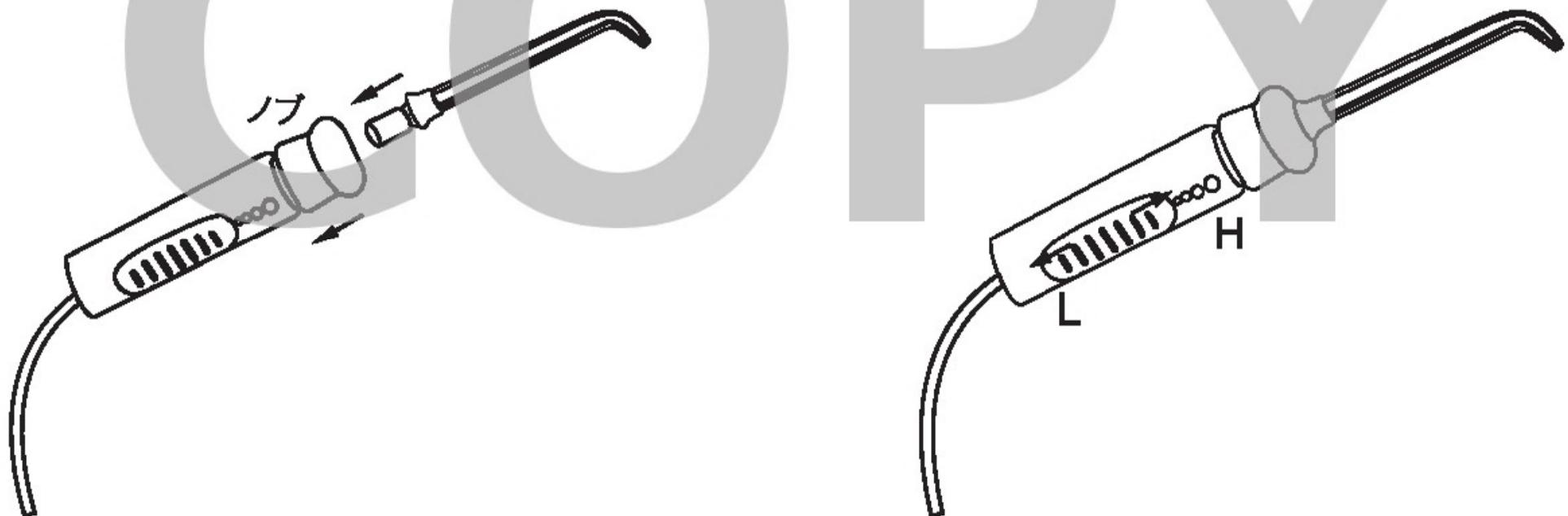

水圧の調整

最初にご使用になるときは、ハンドルの水圧調整レバーを最小設定(一番下)に合わせておきます。シンク(洗面台)に向けて、一番弱い水圧でスイッチを入れてみます。

洗面台に乗り出すようにかがみ、チップを口腔内に入れ、チップを歯の方に向け、一方の手で、スイッチを入れます。

(スイッチは上に上げると ON、下に下げると OFF になります)

水圧はハンドルに付いている水圧調整レバーをスライドさせて調整します。

※水圧調整レバーを最小設定にした時も、多少の水が出ますが異常ではありません。モーターを作動中、長時間水流を完全に止めるとモーターとポンプへの負荷が大きくなり、故障の原因となるためです。



ハンドル上部のノブを回すと水流の方向を変えることができます。

洗面台の上でかがむようにしてスイッチを入れます。この時必ず弱い水流で始めてください。軽く口を開けながら洗浄した水が飛び散らずに下に流れるようにします。

チップ先端は歯面から約1cmほど離し、水流が歯面に対しておよそ90度の角度で当たるようにします。奥歯から前歯に歯肉の縁や歯と歯の間を洗浄しながらゆっくりと移動させます。歯面に当たってはねた水流がポケットの中も洗浄します。

弱い水圧から始め、慣れてきてから徐々に好みの水圧まで上げて下さい。



終了しましたら必ずスイッチを切り、水槽の水を捨て、電源コードを抜いてください。

※水槽に水を入れたまま放置しますと、作動していなくても水圧でチップ先端から多少の水が漏れますので、ご使用後、水槽の水は必ず捨ててください。

ソフトラバーチップ

弱い水圧で、ジェットチップと同様に、歯と歯の間や、歯肉の縁にそって洗浄してください。ポケットなど気になる部分をピンポイントで洗浄します。




タンクリーナーチップ

水圧を低く設定し、舌の奥から手前に向けて洗浄します。弱い水圧から始め、徐々に快適な水圧に調整してください。

主に矯正器具のブラケットワイヤー周りやクラウン、ブリッジ、インプラントなど、歯ブラシでは磨きにくい部分を、ワンタフトのブラシと水流で清掃します。

ジェットチップと同様に、奥歯の裏側から始め、歯肉の縁やワイヤーブラケット周りなど1本1本の歯をていねいに洗浄します。歯の外側（唇側）だけでなく内側（舌側）も同様にていねいに洗浄してください。

歯ならびの悪い方にも便利なチップです。

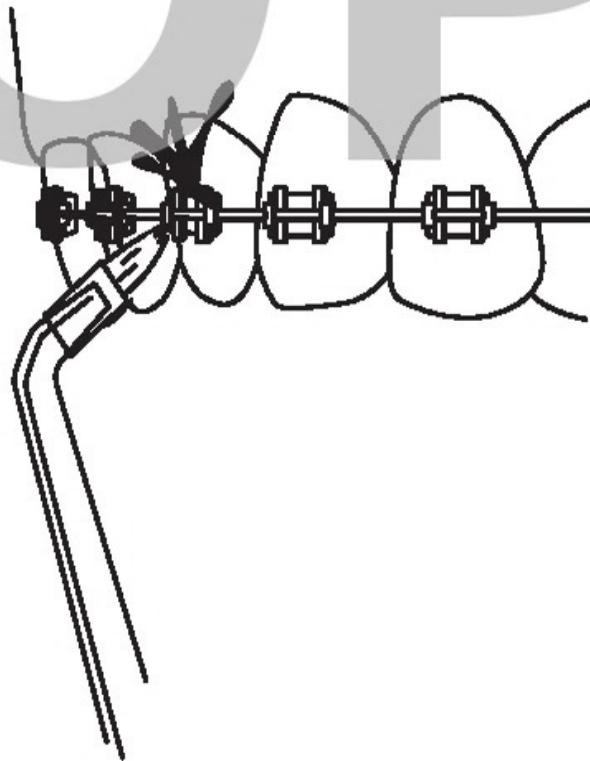

- ・ご使用後は水槽の水を捨て、水槽を外した状態で数秒本体を作動させ、内部の水を出してください。
- ・本体を水やその他液体には絶対に入れないでください。
- ・本体や水槽内部をお掃除するときには、柔らかい布を使用し、薄めた中性洗剤などをご使用ください。研磨性のある洗剤は使用しないでください。
- ・ご使用後は水槽の水気を取ってください。特に長期間ご使用にならない時には水槽内部を乾燥させてから収納してください。濡れたままですとカビなどの原因になります。

H₂O フロス® hf-7J (50/60Hz) 仕様

電源： 100V 50Hz/60Hz

消費電力： 45W

水圧： 1～75psi

パルス： 約1,200回/分

連続使用時間： 8分

水槽容量： 1,000ml

サイズ： 巾 18.5cm x 奥行 11cm x 高さ 12.5cm (収納時) / 20cm (使用時)

重さ： 約1.1kg

電源コード長： 約120cm

※仕様は予告なく変更する事があります。

現象	考えられる原因	対処方法
チップとハンドルノブの間からの水漏れ	チップのロックがされていない	チップを外し、もう一度しっかりと取付ける
ソフトラバーチップのラバー部分の損傷	ラバー部分の摩耗	新しいチップに交換
本体、ハンドルホース部からの水漏れ	ホースの損傷	販売元に修理を依頼
水槽からの水漏れ	1) 水槽のパッキン外れ、損傷 2) 正しくはまっていない	1) 販売元に問い合わせ 2) パッキンを正しく付直す
水圧が弱くなった	1) 水槽がきちんとまつっていない 2) チップ詰まり	1) 水槽のパッキンの位置を確認してしっかりと押さえて取付ける 2) チップを洗浄するか交換
動作しない	モーターが動かない	1) 電源の確認（他の製品が動作するか等） 2) 販売元に問い合わせ

当製品は、ご購入日から1年間の保証となります。保証期間内の通常使用での故障を修理、または弊社の判断により交換を行います。保証期間内修理は「持ち込み修理」となります。

ご購入の日にちがわかるレシートと保証書を保管し、保証サービスを受けるときには必ずご提示ください。ご提示がない場合には保証期間内修理は受けられません。

また、次の場合は保証対象外となります。

- ・弊社により不具合の認められない製品。
- ・製品が業務用や別の用途（本書に記載されている使い方以外）で使用、または誤用されている。
- ・ご購入後の改造や落下させるなど損傷を受けている場合。
- ・標準以外のチップ類を使用していた場合。
- ・日本国外での使用、または製品仕様と異なる電圧、Hzで使用した場合。
- ・ヨードを含むマウスウォッシュ等をご使用の場合。
- ・チップ類は消耗品のため保証対象外です。

製造元：

h2ofloss limited

one raffles place, level24, Singapore 048616

輸入元：

ZENフィールド株式会社

東京都江東区佐賀1-11-11

TEL : 03-3820-2010