



**h2ofloss®**  
**H2Oフロス・口腔洗浄器**  
**モデル:HF-3JP(プレミアム)取扱説明書**

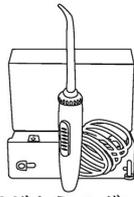

h2oflossをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 h2oflossは、パルス水流とブラシによる洗浄効果により、  
 食べ物のカスやプラークを除去し、歯と歯茎の健康を保つため  
 の補助器具として効果的です。いつまでも自分の歯で噛むため  
 に、そして輝く笑顔のために、本製品をお役立て下さい。

本製品を安全に、そして最大限に活用するために、本説明書をよ  
 くお読みになつて下さい。  
 本取扱説明書は必ず保管してください。

**製品内容:**

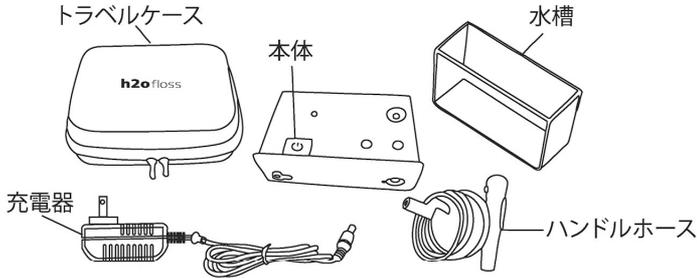

**付属品**

**チップ類:**

- ジェットチップ (2本)
- 矯正用チップ (1本)
- ソフトラバーチップ (1本)
- タンククリーナー (1本)
- 充電器 x 1
- トラベルケース x 1



**【製品保証】**


当製品は、ご購入日から1年間の保証となります。保証期間内の通常使用での故障を修理、または弊社の判断により交換を行います。保証期間内修理は「持ち込み修理」となります。  
 ご購入の日にちがわかるレシートと保証書を保管し、保証サービスを受けるときには必ずご提示ください。ご提示がない場合には保証期間内修理は受けられません。また、次の場合は保証対象外となります。  
 ・弊社により不具合の認められない製品。  
 ・製品が業務用や別の用途(本書に記載されている使い方以外)で使用、または誤用されている。  
 ・ご購入後の改造や落下させるなど損傷を受けている場合。  
 ・当製品専用以外のチップ類を使用していた場合。  
 ・日本国外での使用、または製品仕様と異なる電圧、Hzで使用した場合。  
 ・ヨードを含むマウスウォッシュ等をご使用の場合。  
 ・チップ類は消耗品のため保証対象外です。

製造元: Shenzhen Baofengtong Electrical Manufacturing Co., Ltd  
 輸入元: ZENフィールド株式会社


【本社】東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山942

【センター】千葉県船橋市前原西2-14-1-811 TEL:050-1219-2834  
 e-mail: inf@zenfield.co.jp / URL: www.zenfield.co.jp

**【ご使用方法】**

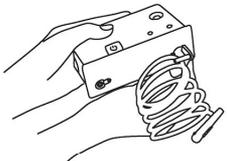


①ホースの差し込みを本体のホース差込口に入れます。(長短の出張りを合わせます)

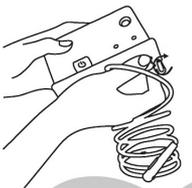


②差し込んだホースの差し込み部分を、時計回りに1/4回転させてカチッと合います。




③ご使用になるチップを選びハンドルに装着します。少し回すようにして入れると入りやすくなります。\*チップを抜くときには、ハンドルのチップ解放ボタンを押しながら引き抜いてください。

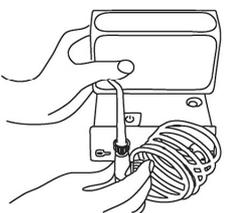

④水槽と本体をジョイント部分を合わせてしっかりと上から押えてはめます。水槽に水を入れます。(冷水はしみますので、その場合はぬるいお湯をご利用下さい)

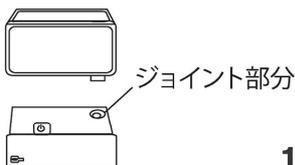

**※当製品の連続使用回数は4回までとなっています。それを越えて使用しますとモーターの故障につながります。4回連続使用した時は2時間以上おいてモーターを冷ましてください。**

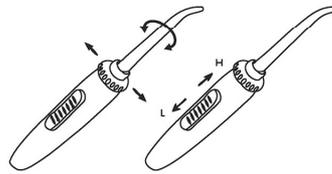

⑤ハンドル上部のノブを回転させて水流を出す方向を変えることができます。また、水圧はハンドルの水圧調節レバーを上下して変えてください。  
 ※初めは最も低水圧から始め慣れてから徐々に調整してください。

⑥洗浄を始めましょう。

※チップをお口に入れる前にシンクに向けて水を出してみましょう。片手で本体を持ち、洗面台の上にかがみます。チップを口腔内に入れてから、チップを歯の方に向け、一方の手で、スイッチを入れます。弱い水圧から始め、慣れてきてから徐々に好みの水圧まで上げて下さい。終了しましたら必ず水槽を外して空回りさせ、本体内の水を出し切ってください。\*水槽に水を入れたまま放置しますと、水圧でチップ先端から水が漏れますので、ご使用後、水槽の水は必ず捨ててください。



**【使い方のヒント】**

洗面台の上でかがむようにしてスイッチを入れます。この時必ず弱い水流で始めてください。軽く口を開けながら洗浄した水が飛び散らずに下に流れるようにします。本体は片方の手で持ちながら使用すると良いでしょう。


### 【各チップの使用方法】

#### ジェットチップ



チップ先端は歯面から約1cmほど離し、水流が歯面に対しておおよそ90度の角度で当たるようにします。奥歯から前歯に歯肉の縁や歯と歯の間を洗浄しながらゆっくりと移動させます。歯面に当たってはねた水流がポケットの中も洗浄します。

#### 歯列矯正用チップ

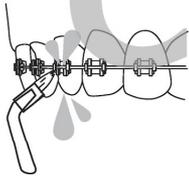


主に矯正器具のブラケットワイヤー周りやクラウン、ブリッジ、インプラントなど、歯ブラシでは磨きにくい部分を、ワンタフトのブラシと水流で清掃します。ジェットチップと同様に、奥歯の裏側から始め、歯肉の縁やワイヤーブラケット周りなどを1本1本の歯をていねいに洗浄します。歯の外側(唇側)だけでなく内側(舌側)も同様にていねいに洗浄してください。

#### ソフトラバーチップ



弱い水圧で、ジェットチップと同様に、歯と歯の間や、歯肉の縁にそって洗浄してください。ポケットなど気になる部分をピンポイントで洗浄します。

#### タンクリーナーチップ

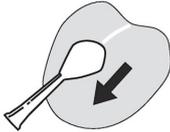

水圧を低く設定し、舌の奥から手前に向けて洗浄します。弱い水圧から始め、徐々に快適な水圧に調整してください。

3


### 【お手入れ方法】

- ご使用後は水槽の水を捨て、水槽を外した状態で数秒本体を動作させ、内部の水を出してください。
- 本体を水やその他液体には絶対に浸けないでください。
- 本体や水槽内部をお掃除するときには、柔らかい布を使用し、薄めた中性洗剤などをご使用ください。研磨性のある洗剤は使用しないでください。
- ご使用後は水槽の水気を取ってください。特に長期間ご使用にならない時には水槽内部を乾燥させてから収納してください。濡れたままですとカビなどの原因になります。



### してはいけないこと

禁止

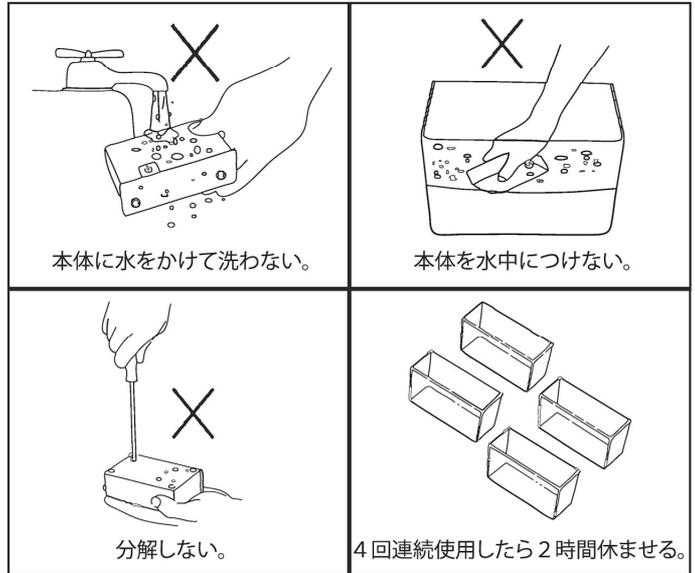

4

### 本取扱説明書は必ず保管してください。

#### 【充電器について】

※充電する時には本体のスイッチをoffにしてください。  
 ※スイッチがonのままでは充電がされませんのでご注意ください。  
 ※この製品は充電器を接続したまま使用する仕様ではありません。  
 必ず充電してからご使用ください。フル充電にはおおよそ5時間必要です。  
 充電器をコンセントに差し込み本体に充電器の充電側のプラグを差し込みます。70%程度充電が完了するとLEDランプが緑に点灯します。フル充電には約5時間かかります。充電が完了しますと過充電防止機能が働きますが、長時間プラグを差し込んだままにしないでください。

#### 【バッテリーについて】

ニッケル水素電池は完全に使い切る前に早めに充電をしましょう。使い切った状態で長期間放置しますと短寿命となります。

#### 【バッテリーの廃棄について】

当製品はニッケル水素電池(Ni-MH)を使用していますので、有害なカドミウムは含みませんが、製品を廃棄する場合には、お住まいの地域の方法に従って適切に処理してください。

#### 【安全にお使いになるために】

他の電気製品同様、ご使用の際には、次のことにご注意下さい。特にお子様のいるご家庭では十分にお気を付け下さい。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、保管してください。



#### 感電を避けるために

- 使用後は必ずコンセントを抜いてください。
- 濡れた手で充電器に触らないで下さい。
- 水やその他の液体の中に浸けないで下さい。
- 電源コードに損傷がないことをときどき確認してください。
- 入浴中は使用しないで下さい。
- 製品が浴槽、シャワー、シンク、トイレ等に落ちるような場所に置かないで下さい。
- 水中に落ちた場合、製品をすぐに拾わず、速やかに電源コンセントを抜いて下さい。

5



#### やけど、感電、発火、重大な怪我や損傷を避けるために

- 製品仕様で決められた電圧以外のコンセントに挿すことはしないでください。
- 電源コードやコンセントが損傷している、正しく動作しない、落としたり強い衝撃を与えた、水(その他の液体)に浸けてしまったなどの場合は製品の使用を中止してください。
- 当製品専用のバッテリー以外でのご使用は発火や破裂などの恐れがありますので絶対にお止めください。
- お子様や特に必要がある方については、本製品を正しくお使いになるための適切な指導、監督が必要です。
- 舌の裏側、耳、鼻、その他のデリケートな場所に水を直接噴射しないでください。この製品は、強い水圧で水を噴射するため、これら敏感な部分に当たると重大な怪我をする可能性があります。正しいご使用方法については、「使用方法」を参照して下さい。
- 本製品のご使用については、本取扱説明書に記載された方法に従うか歯科医の指導に従って下さい。
- 口腔内にアクセサリーを着けているときは使用しないで下さい。使用前には必ず外して下さい。
- チップやブラシ類は、h2oflossが推奨する専用をお使い下さい。  
 ※コードを含む液を使用すると、モーターやホース内で水が詰まったり故障を引き起こします。  
 ※また、ソーダ水、塩、その他研磨性のある液体などは機械を損傷させますので使用しないでください
- マウスウォッシュなどをお使いの後は、詰まりを防ぐため、水道のお水を通して機械内部を洗浄してください。
- 本製品の開口部やホースには、異物を入れしないで下さい。
- 製品や充電器、コードを熱い物に近づけないでください。
- 酸素またはスプレー缶を使用している場所では使用しないで下さい。引火や爆発の恐れがあります。
- 1年以内に、口腔内の外科処置を受けた場合、調子が悪い、または歯周病が進んでいる場合などの場合には、ご使用前に歯科医に相談してください。
- 当製品の連続使用時間は水槽一杯状態で4回分です。4回ご使用のあとは2時間ほど時間を置いてモーターを冷ましてからご使用ください。

6