


h2ofloss®

コードレス充電式口腔洗浄器

モデル：hf-6J

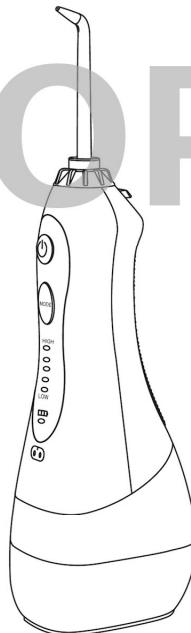

この度はh2ofloss製品をご購入頂きありがとうございました。
製品を正しく安全にお使いになるためにユーザーマニュアルを
よく読み、保証書とともに保管してください。

【製品保証】

当製品は、ご購入日から1年間の保証となります。保証期間内の通常使用での故障を修理、または弊社の判断により交換を行います。保証期間内修理は「持ち込み修理」となります。

ご購入の日にちがわかるレシートと保証書を保管し、保証サービスを受けるときには必ずご提示ください。ご提示がない場合には保証期間内修理は受けられません。また、次の場合は保証対象外となります。

- ・弊社により不具合の認められない製品。
- ・製品が業務用や別の用途(本書に記載されている使い方以外)で使用、または誤用されている。
- ・ご購入後の改造や落下させるなど損傷を受けている場合。
- ・標準以外のチップ類を使用していた場合。
- ・日本国外での使用、または製品仕様と異なる電圧、Hzで使用した場合。
- ・ヨードを含むマウスウォッシュ等をご使用の場合。
- ・チップ類は消耗品のため保証対象外です。

製造元: Shenzhen Baofengtong Electrical Manufacturing Co., Ltd

輸入元: ZENフィールド株式会社

【本社】東京都港区南青山2-2-15 ウイン青山942

【センター】千葉県船橋市前原西2-14-1-811 TEL:050-1219-2834
e-mail: info@zenfield.co.jp / URL: www.zenfield.co.jp


※製品の保証は取扱説明書に従ったご使用方法でのみ有効となります。

【仕様】

- モデル: hf-6J
- 材質: ABS, PC
- 入力: 5V, 1A
- 出力: 5W
- バッテリー容量: 2150mAh
(リチウム電池)

- 水圧レベル: 1.4~7.7kgf/cm²
- 充電時間: 約5時間
- 防水性: IPX7
- タンク容量: 300ml
- 水流: 断続パルス水流

【梱包内容/製品説明】

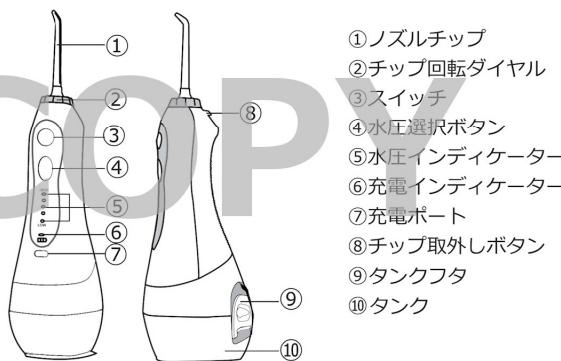

【安全にお使いになるために】

他の電気製品同様、ご使用の際には、次のことご注意下さい。
特に子供のいるご家庭では十分にお気を付け下さい。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、保管してください。

⚠ 感電を避けるために

- ・使用後は必ずコンセントを抜いてください。
- ・濡れた手で充電器に触らないで下さい。
- ・水やその他の液体の中に浸けないで下さい。
- ・電源コードに損傷がないことをときどき確認してください。
- ・入浴中は充電及び使用しないで下さい。
- ・製品が浴槽、シャワー、シンク、トイレ等に落ちるような場所に置かないで下さい。
- ・水中に落ちた場合、製品をすぐに拾わず、速やかに電源コンセントを抜いて下さい。

⚠ やけど、感電、発火、重大な怪我や損傷を避けるために

- ・製品仕様で決められた電圧以外のコンセントに挿すことはしないで下さい。
- ・電源コードやコンセントが損傷している、正しく動作しない、落としたり強い衝撃を与えた、水(その他の液体)に浸けてしまったなどの場合は製品の使用を中止してください。
- ・当製品専用のバッテリー以外でのご使用は発火や破裂などの恐れがありますので絶対にお止めください。
- ・お子様や特に必要がある方については、本製品を正しくお使いになるための適切な指導、監督が必要です。
- ・舌の裏側、耳、鼻、その他のデリケートな場所に水を直接噴射しないで下さい。この製品は、強い水圧で水を噴射するため、これら敏感な部分に当てると重大な怪我をする可能性があります。正しいご使用方法については、「使用方法」を参照して下さい。
- ・本製品のご使用については、本取扱説明書に記載された方法に従うか歯科医の指導に従って下さい。
- ・口腔内にアクセサリーを着けているときは使用しないで下さい。使用前には必ず外して下さい。

⚠ やけど、感電、発火、重大な怪我や損傷を避けるために

- ・チップやブラシ類は、h2oflossが推奨する専用品をお使い下さい。
- ※ヨードを含む液を使用すると、モーターとホース内で水が詰まつたり故障を引き起こします。
- ※また、ソーダ水、塩、その他研磨性のある液体などは機械を損傷させますので使用しないでください。
- ・マウスウォッシュなどをお使いの後は、詰まりを防ぐため、水道のお水を通して機械内部を洗浄してください。
- ・本製品の開口部やホースには、異物を入れないで下さい。
- ・製品や充電器、コードを熱い物に近づけないでください。
- ・酸素またはスプレー缶を使用している場所では使用しないで下さい。引火や爆発の恐れがあります。
- ・1年以内に、口腔内の外科処置を受けた場合、調子が悪い、または歯周病が進んでいる場合などの場合には、ご使用前に歯科医に相談してください。
- ・当製品の連続使用時間は水槽に一杯状態で4回分です。
4回ご使用のあとは2時間ほど時間をおいてモーターを冷ましてからご使用ください。

【お手入れ方法】

- ・ご使用後はタンクの水を捨てて数秒空回しをして内部の水を出して下さい。
 - ・本体を水や液体中に浸けないでください。
 - ・本体やタンク内部をお掃除するときは、薄めた中性洗剤などで柔らかい布や、細いブラシなどを用いて下さい。研磨性のある洗剤は使用しないでください。
 - ・ご使用後は乾いた布で水気をふき取り、特に長期間ご使用にならないときには、タンク内を乾燥させてから収納してください。
 - 濡れたまま収納するとカビなどの原因になりますのでご注意下さい。
- 【バッテリーについて】
- ・当製品はリチウム電池を使用しています。製品を廃棄する場合、お住いの地域の方法に従って処理してください。
 - ・当製品のバッテリーは交換できません。


- 03 -

シンクの上にかがみ、唇を少し開いて洗浄した水が自然に流れ落ちるように使用します。低い水圧から始め、徐々に適した水圧でご使用ください。



ジェットチップ

チップ先端は歯面から約1cmほど離し、水流が歯面に対しておよそ90度の角度で当たるようにします。奥歯から前歯に歯肉の縁や歯と歯の間を洗浄しながらゆっくりと移動させます。歯面に当たってはねた水流がポケットの中も洗浄します。

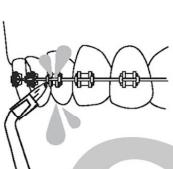


歯列矯正用チップ

主に矯正器具のブラケットワイヤー周りやクラウン、ブリッジ、インプラントなど、歯ブラシでは磨きにくい部分を、ワンタフトのブラシと水流で清掃します。ジェットチップと同様に、奥歯の裏側から始め、歯肉の縁やワイヤーブラケット周りなどを1本1本の歯をていねいに洗浄します。歯の外側(唇側)だけでなく内側(舌側)も同様にていねいに洗浄してください。



ソフトラバーチップ

弱い水圧で、ジェットチップと同様に、歯と歯の間や、歯肉の縁にそって洗浄してください。ポケットなど気になる部分をピンポイントで洗浄します。

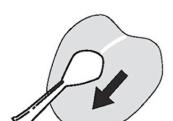

タンクリーナーチップ

水圧を低く設定し、舌の奥から手前に向けて洗浄します。弱い水圧から始め、徐々に快適な水圧に調整してください。

ご使用後はタンクに残った水を捨ててください。

マウスウォッシュなどをご使用した場合は、一度水道水を入れて動作させて下さい。

- 05 -

【ご使用方法】

ご使用前に充電してください



製品に充電器は付属していません。付属のUSB充電コードを用いてスマホの様にUSBポートからの充電が可能です。充電を始めると、製品本体の充電インディケーターが点滅し、充電が終わると点灯に変わります。フル充電には3~5時間かかります。



タンクに水を入れます

タンクのフタを開け、水を入れます。少しずつ水がおすすめです。



チップの装着

チップを選び、本体先端の穴に力ちつというまで差し込みます。

チップを外すときにはチップ取外しボタンを押してください。

注意：動作中にチップ取外しボタンを押さないでください。チップが勢いよく飛び出し危険です。

- 04 -

トラブルシューティング

タンク水漏れ	シールリングの異常	シールリングを付けなおす
水圧が低い	電池の消耗	充電する
	チップの詰まり	新しいチップに交換
フル充電しても 数分で止まる	電池の寿命	販売店に相談
	充電コードに問題	充電コードの交換
	充電されない	充電元をチェック
動作音はあるが 水が出ない	チップの詰まり	新しいチップに交換
モーターが 動かない	バッテリー放電（数か月ほど使用 しないでほおっておいた等）	16時間程度充電する
使用中に突然 止まった	オーバーヒート防止機能 (最高水圧で5回以上の連続使用時)	2時間以上してから再使用

上記で解決しない場合、ご購入店にご相談ください。

■初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合に、お水が出にくいことがあります。そのような場合にはチップの挿入口（右図）に少量のお水を入れてからチップを装着し、スイッチを入れてみてください。



■お水のタンクは右図のように外すことが可能です。特に初めて外す場合には軽く、力がいりますのでご注意ください。



- 06 -